


Pompkeuze

Neem bij de keuze van de pomp de volgende punten in overweging:

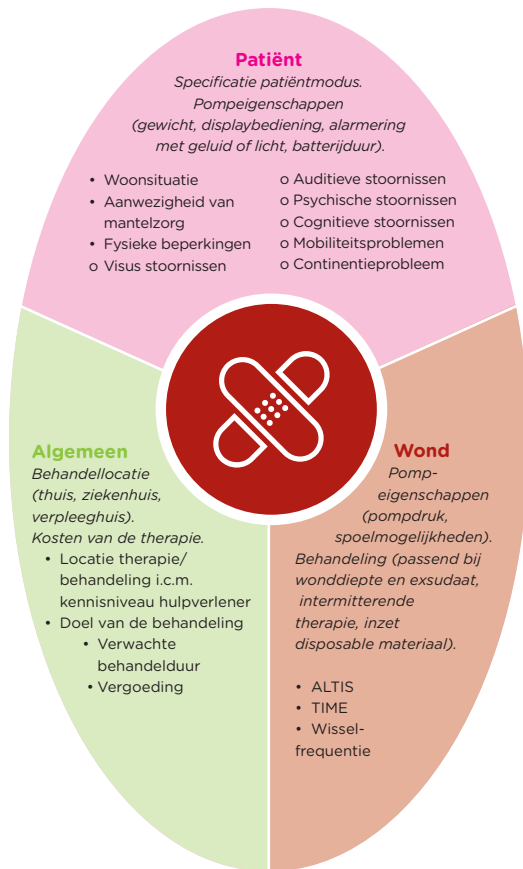

www.mediq.nl

Mediq is gecertificeerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001: 2008 en erkend binnen de Erkenningsregeling Medisch Speciaalzaken

*Deze handige zakkaart is mede mogelijk gemaakt door de werkgroep 'Negatieve druktherapie':
Barbara den Boogert, Diana van Dijk,
Eveliëne Bakkenes en Elise den Hollander.*



NEGATIEVE DRUKTHERAPIE

Wondzorg met
een optimaal
resultaat

Negatieve druktherapie

Negatieve druktherapie oftewel Negative Pressure Wound Therapy (NPWT) is niet meer weg te denken in de moderne wondbehandeling. Er zijn inmiddels diverse systemen van verschillende fabrikanten op de markt. Van mechanische pompen tot geavanceerde therapieën met spoelsysteem. Het voorschrijven van hulpmiddelen voor wondbehandeling is functioneringsgericht; hoe kan de patiënt met zijn functiestoornis, in dit geval de wond, de dagelijkse activiteiten zoveel mogelijk voortzetten? Door de juiste negatieve druktherapie te kiezen die aansluit op de individuele kenmerken en omstandigheden van de patiënt wordt de kans op een succesvolle behandeling vergroot.

De negatieve druksystemen zijn verdeeld in groepen:

- Negatieve druktherapie met batterij
- Negatieve druktherapie met mechanische aandrijving
- Negatieve druktherapie met accu
- Negatieve druktherapie met ingebouwd spoelsysteem
- Negatieve druktherapie voor bijzondere situaties



Patiënt

Fabrikant	Smith&Nephew	Smith&Nephew	Smith&Nephew	ConvaTec	KCI	KCI	Smith&Nephew	Smith&Nephew	KCI	Smith&Nephew	KCI	KCI
Classificatie	A	E	A	A	B	B	C	C	C	D	D	E
patientmodus	nee	nee	nee	nee	nee	nee	ja	nee	ja	nee	nee	nee
gewicht pomp display	110 gr.	110 gr.	110 gr.	78 gr.	100 gr.	70 gr.	1 kg	1,1 kg	1,08 kg	3,7 kg	3,35 kg	200 gr.
alarmering met geluid	nee	nee	nee	nee	nee	nee	ja	ja	ja	ja	ja	ja
alarmering visueel	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
duurzaamheid accu/batterij	168 uur (7 dagen)	169 uur (7 dagen)	336 uur (14 dagen)	720 uur (30 dagen)	pompje vervangen indien cartridge vol	pompje na 30 dagen vervangen	16 uur	20 uur	14 uur	40 uur (1,67 dag)	6 uur	198 uur (7,25 dag)

Wond

hoeveelheid druk	80mm Hg	80mm Hg	80mm Hg	80mm Hg	75-125mm Hg	125mm Hg	40-200mm Hg	40-200mm Hg	25-200mm Hg	40-200mm Hg	25-200mm Hg	125mm Hg
intermitterende therapie mogelijk	nee	nee	nee	nee	nee	nee	ja	ja	ja	ja	ja	nee
spoelmogelijkheden	nee	nee	nee	nee	nee	nee	ja*	nee	nee	nee	ja	nee
foam	foamverband-materiaal	foamverband-materiaal	foamverband-materiaal	foamverband-materiaal	ja (blauwe kleur)	foamverband-materiaal	ja	ja	ja	ja	ja	ja (paarse kleur)
foam wit	nee	nee	nee	nee	nee	nee	ja	ja	ja	ja	ja	nee
gaas	nee	nee	nee	nee	nee	nee	ja	ja	ja	ja	ja	nee
zilverproducten	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	ja	nee	ja	nee
diepte wond	oppervlakkig tot 2 cm	incisie	oppervlakkig, met wondvuller tot 7 cm	oppervlakkig	ondermijnd, relatief oppervlakkig (1-5 cm)	oppervlakkig to 1 cm	diep/ondermijnd/oppervlakkig/SSG	diep/ondermijnd/oppervlakkig/SSG	diep/ondermijnd/oppervlakkig/SSG	diep/ondermijnd/oppervlakkig/SSG	diep/ondermijnd/oppervlakkig/SSG	incisie
hoeveelheid exudaat	afhankelijk van grootte verband	afhankelijk van grootte verband	afhankelijk van grootte verband	afhankelijk van grootte verband	cartridge van 60 en 150 ml	afhankelijk van grootte verband	canister van 300 en 750 ml	canister van 300 en 750 ml	canister van 300 ml	canister van 250 en 800 ml	canister van 300, 500 en 1.000 ml	45 en 150 ml afhankelijk van type Prevena pompje

Algemeen

thuis	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nee	nee	ja
ziekenhuis	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
verpleeghuis	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja

* ja, met variabele stand/zelf vloeistof inbrengen

Meer informatie

Meer informatie over de pomp, het gebruik en de disposable materialen vindt u op de website van de fabrikant.

www.gdmedicalpharma.nl

www.convatec.nl

www.smith-nephew.com/nederland

Bestellen

Online bestellen

Indien u liever digitaal bestelt kan dit ook via ons online bestelsysteem Xtranet. U hoeft zich hiervoor slechts eenmalig aan te melden via mediqcombiicare.nl

Telefonisch bestellen: 0800 - 6 226 226

- Onze medewerker klantenservice doorloopt met u het verantwoordingsformulier voor verbandhulpmiddelen of negatieve druktherapie;
- Geef vervolgens de artikelen en de aantallen door die u wilt bestellen;
- De bestelling wordt de volgende dag in een neutrale verpakking bezorgd;
- Een ander gewenst tijdstip of afleverplaats is mogelijk.

Vragen

- Via onze **Zorgadvieslijn 0800 - 6 226 226**, het telefoonnummer voor zorgprofessionals, kunt u aanmelden, bestellen en advies krijgen. Ook vragen over vergoedingen van materialen en alternatieven kunt u hier stellen.
- Heeft u nog geen verantwoordingen in uw bezit? Vraag deze dan tijdens uw bestelling aan bij de medewerker van onze klantenservice.