



Vorbereitung

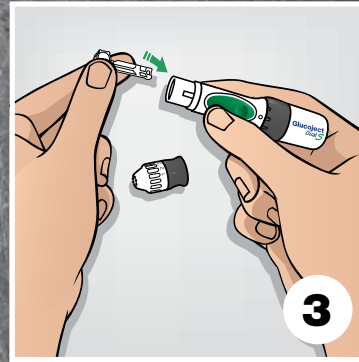



GlucoMen[®] LX PLUS⁺



De enige meter die je écht nodig hebt.

Glucose

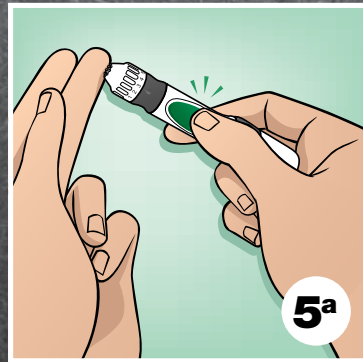

Ketonen

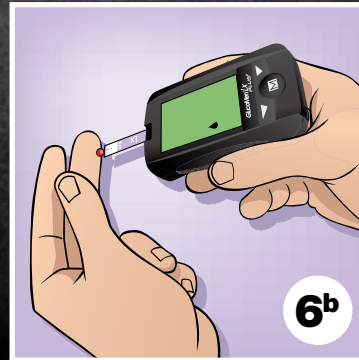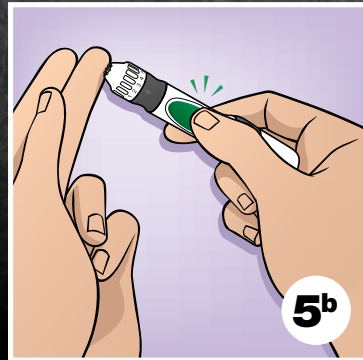

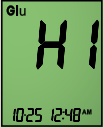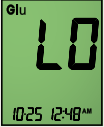Melding	Wat betekent dit?	Wat moet ik doen?
	Softwarefout.	Bel GRATIS de Menarini Klantenservice: 0800-022 54 22.
	Hardwarefout van het systeem.	Bel GRATIS de Menarini Klantenservice: 0800-022 54 22.
	Fout omgevingstemperatuur	De meter bevindt zich buiten het voor de test vereiste temperatuurbereik van 5 tot 45 °C (41 tot 113 °F). Verplaats de meter naar een warmere of koelere plek en wacht enkele minuten.
	Teststripfout: gebruikte of beschadigde teststrip.	Test opnieuw met een nieuwe teststrip.
	Bloeddruppelfout.	Bloeddruppel of controlevloeistof zijn niet goed op de teststrip aangebracht, of de teststrip kan beschadigd zijn. Controleer uw methode voor monsterafname. Het volume van het bloedmonster kan onjuist zijn of de hematocrietwaarde kan buiten de voor een glucosemeting toegestane range vallen.
	Uw bloedglucosewaarde is hoger dan 33,3 mmol/L. U kunt een hoge bloedsuiker hebben.	Herhaal de test onmiddellijk met een nieuwe teststrip. Indien uw resultaten nog steeds te hoog zijn moet u de behandeling volgen die uw professionele zorgverlener u heeft aangeraden en/of hiermee onmiddellijk contact opnemen.
	Uw bloedglucosewaarde is lager dan 1,1 mmol/L. U kunt een lage bloedsuiker hebben.	Herhaal de test onmiddellijk met een nieuwe teststrip. Indien uw resultaten nog steeds te laag zijn moet u de behandeling volgen die uw professionele zorgverlener u heeft aangeraden en/of hiermee onmiddellijk contact opnemen.

Melding	Wat betekent dit?	Wat moet ik doen?
	Batterij begint leeg te raken, maar u kunt nog een test uitvoeren. Batterij zal op alle schermen verschijnen.	Wij raden u aan de batterij onmiddellijk te vervangen. Er kunnen nog maar 20 metingen worden uitgevoerd.
	Wanneer de bloedglucosewaarde 13,9 mmol/L of hoger is, worden drie meldingen cyclisch weergegeven met het glucoseresultaat.	Bel GRATIS de Menarini Klantenservice: 0800-022 54 22.
	Een preprandiale glucosemeting met geactiveerd alarm.	De gebruiker heeft de mogelijkheid een memo in te stellen voor een 2,5 uur later uit te voeren postprandiale glucosetest.
	- Teststrip is andersom of niet helemaal ingevoerd - Batterij is leeg. - Batterij niet goed geïnstalleerd of er zit geen batterij in de meter.	Voer de teststrip goed in, met het opschrift 'LX' of 'Ket' naar boven gericht en buiten de meter. Vervang de batterij. Controleer of de batterij goed geplaatst is met het '+' teken naar boven. Voor assistentie, bel GRATIS de Menarini Klantenservice: 0800-022 54 22.
	- Bloeddruppel grootte ontoereikend. - Druppel aangebracht nadat de meter zichzelf automatisch heeft uitgeschakeld. - Teststrip kan beschadigd zijn. - Het kan zijn dat de meter niet goed werkt.	Herhaal de test met een nieuwe teststrip. Herhaal de test met een nieuwe teststrip. Herhaal de test met een nieuwe teststrip. Neem na drie pogingen contact op met de Menarini Klantenservice voor assistentie, bel GRATIS 0800-022 54 22.