



HET GEBRUIK VAN DE HUMAPEN[®] SAVVIO[™]

HumaPen[®] SAVVIO[™] onderdelen

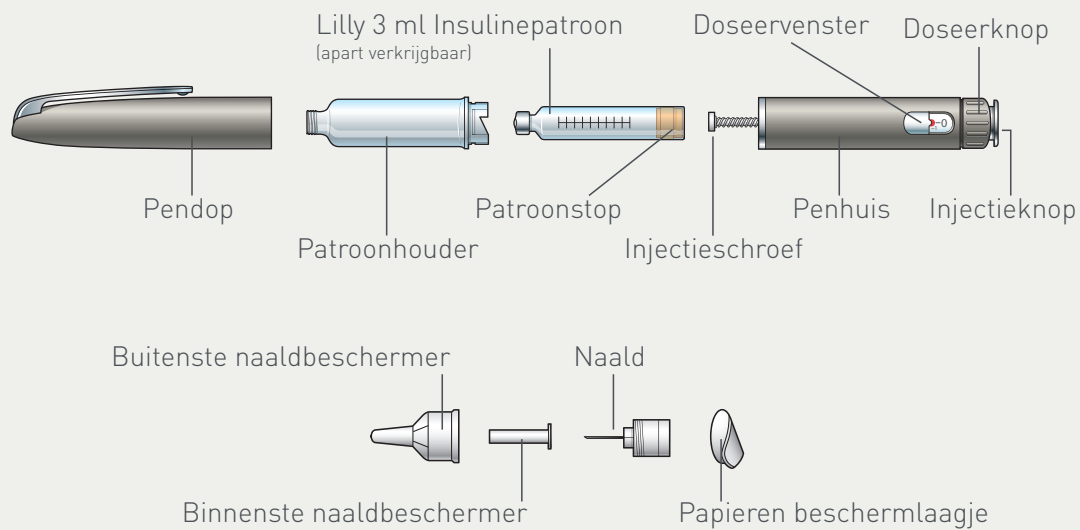


Een HumaPen[®] SAVVIO[™] voorbereiden voor gebruik


Plaatsen van insulinepatroon

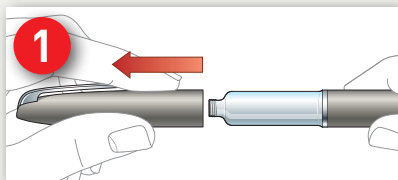


Trek de pendop eraf en leg deze opzij.

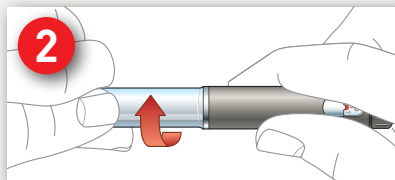


Patroonhouder losdraaien.

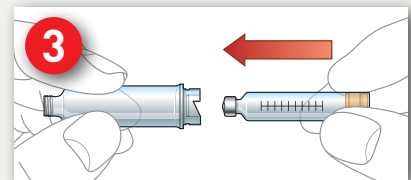

Steek het smalle uiteinde van de 3ml insulinepatroon in de patroonhouder.

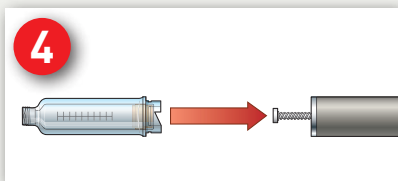


Wanneer injectieschroef uitsteekt, gebruik dan de patroonstop om de injectieschroef weer terug te duwen.

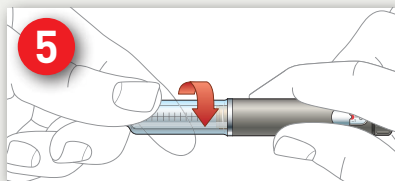


Druk de patroonhouder en het penhuis recht tegen elkaar. Draai de penhuis op de patroonhouder tot het stevig vast zit.

Alleen bij troebele insuline

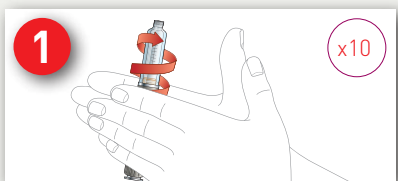


Rol de pen 10 keer zachtjes heen en weer.

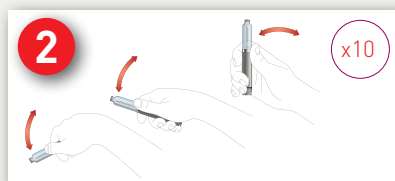


Zwenk de pen 10 keer. De insuline moet er nu gelijkmatig gemengd uitzien.

**Volg deze instructies
vóór elke injectie op!**


De naald bevestigen

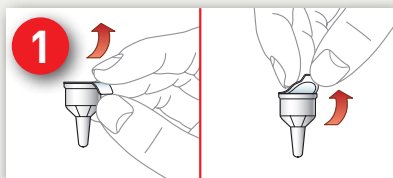

Verwijder het papieren bescherm- laagje en gooi dit weg.

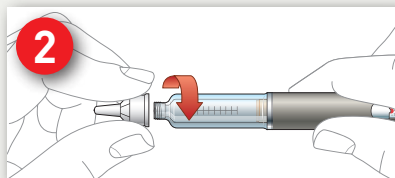


Schroef het naaldje recht op de patroonhouder totdat het stevig vast zit.

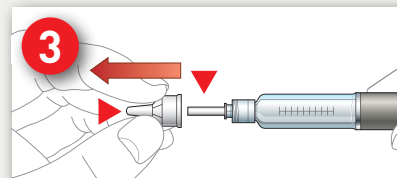


► Trek de buitenste naaldbescherm- eraf en bewaar deze om na uw injectie de naald ermee te verwijderen.

▼ Trek de binnenste naaldbescherm- eraf en gooi deze weg.

De pen ontluchten

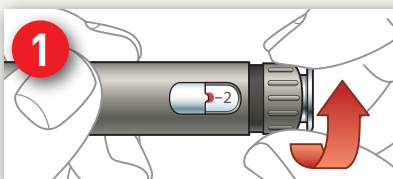


Stel 2 eenheden in.

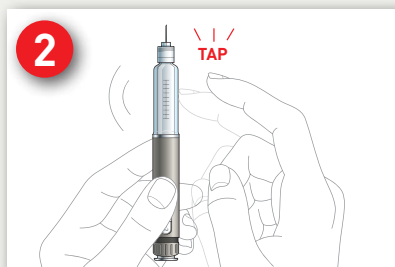

Houd de pen omhoog gericht. Tik tegen de patroonhouder zodat de lucht zich bovenin verzamelt.

LET OP: Als na een aantal malen ontlichten de insuline nog steeds niet gelijkmatig uit de naald stroomt, dan kan uw naaldje mogelijk verstopt zijn. Bevestig dan een nieuw naaldje.

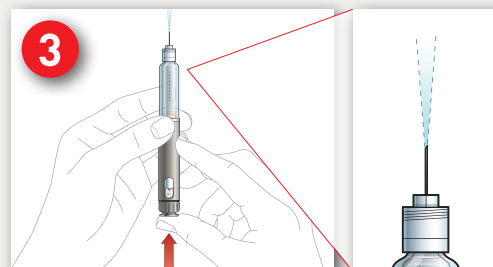


Druk op de injectieknop. Kijk of de insuline gelijkmatig uit de naald stroomt. Ontlucht de pen nog een keer wanneer er geen stroom insuline verschijnt.

LET OP: Als u niet ontlicht dan kunt u te veel of te weinig insuline krijgen.

De pen is **NIET** goed ontlicht als u alleen een paar druppels insuline ziet verschijnen.


Injecteren van de dosis

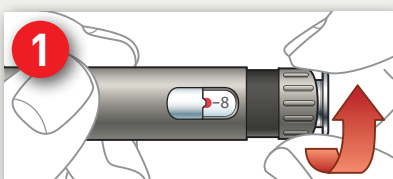

Draai de doseerknop naar de gewenste dosis. Als voorbeeld ziet u op de afbeelding 8 eenheden.

Als u teveel eenheden heeft ingesteld, dan kunt u dit corrigeren door de doseerknop terug te draaien.


Opmerking: Met de pen kunt u niet meer eenheden instellen dan het aantal eenheden insuline dat nog over is in de patroon.

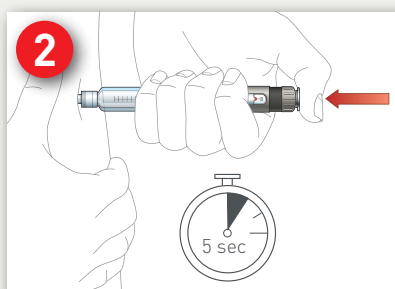

Steek de naald in de huid volgens de instructies van uw arts, diabetes-adviseur/verpleegkundige of apotheker.

Plaats uw duim op de injectieknop en druk stevig in tot de knop niet meer verder kan.

LET OP: Houd de injectieknop **5 seconden** ingedrukt om de volledige dosis te ontvangen. Verwijder de naald uit de huid.

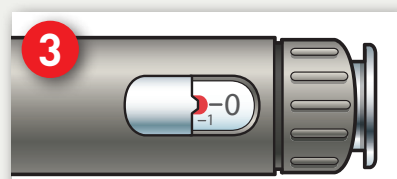

Opmerking: Om er zeker van te zijn dat u een complete dosis heeft ontvangen moet u controleren of er een **0** in het doseervenster staat nadat het naaldje uit de huid verwijderd is. Als u niet zeker bent of u de volledige dosering hebt geïnjecteerd, **neem dan geen nieuwe dosering**. Neem contact op met het lokale Lilly filiaal of uw arts, diabetesadviseur/verpleegkundige of apotheker.