



# JuniorSTAR®

## GEBRUIKSINSTRUCTIES


JuniorSTAR® is een halve eenheden,  
navulbare insulinepen.



verrijkt met

layar

Volg de instructies voor gebruik van je arts,  
diabetesverpleegkundige of apotheker.

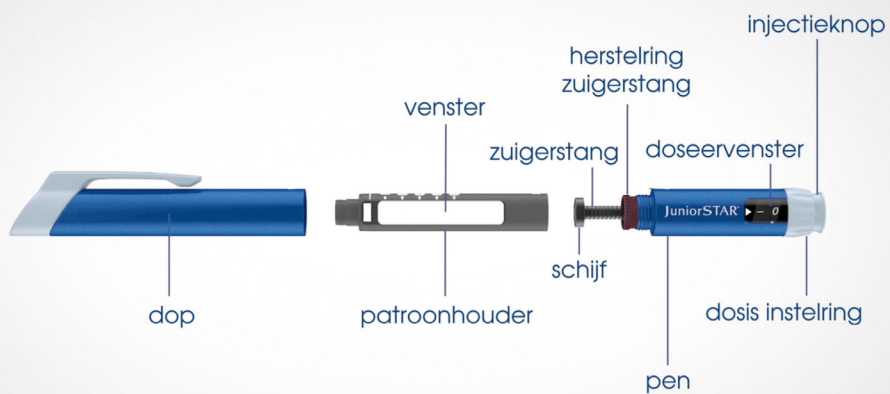

## STAP 1

### PLAATS EEN NIEUW INSULINEPATROON

- A. Trek de dop van de pen af.
- B. Schroef de patroonhouder los van de pen.  
Verwijder de lege insulinepatroon, als deze nog in de patroonhouder zit.
- C. Draai de zuigerstang helemaal terug naar de startpositie.
- D. Controleer de insuline
- Controleer of het een nieuw insulinepatroon is, deze mag niet verlopen of beschadigd zijn.
  - Controleer het etiket om er zeker van te zijn dat dit de juiste insuline is.
- ! Als je de verkeerde insuline gebruikt, kan dit leiden tot ongewenste veranderingen in de bloedsuikerspiegel die schadelijk kunnen zijn voor je gezondheid.
- E. Plaats de nieuwe patroon in de patroonhouder.  
Plaats geen patroon die al gedeeltelijk gebruikt is.
- F. Schroef de patroonhouder stevig vast op de pen.

Controleer of de symbolen op de patroonhouder en de pen tegenover elkaar liggen.



I.B



I.C



I.E



CONTROLEER JE INSULINE

Controleer de naam op de insulinepatroon elke keer voordat je injecteert. Indien de naam van de insuline niet zichtbaar is in de patroonhouder, draai de patroon met je vingers tot de naam zichtbaar is.

A. Controleer hoe je insuline er uitziet.

- Als je heldere insuline gebruikt, mag je de patroon niet gebruiken als de insuline troebel of verkleurd is.
- Als je een insulinesuspensie gebruikt, zwenk de pen dan minstens 10 keer op en neer om de insuline opnieuw te mengen. Zwenk de pen voorzichtig om schuimvorming in de patroon te voorkomen.



## STAP 3

BEVESTIG EEN NIEUWE NAALD

Gebruik uitsluitend BD of Ypsomed naalden, lees de gebruiksaanwijzing goed door. Gebruik voor elke injectie altijd een nieuwe steriele naald.

A. Verwijder het beschermzegel van een nieuwe naald.

B. Plaats de naald op de patroonhouder. Houd deze daarbij recht. Schroef of druk de naald stevig vast.



## STAP 4

### VOER ALTIJD EEN VEILIGHEIDSTEST UIT

- A. Stel een dosis van 2 eenheden in door aan de dosisinstelring te draaien.
- B. Verwijder de buitenste en binnenste naaldbeschermhuls van de naald.
- C. Houd de JuniorSTAR® pen vast met de naald naar boven gericht.  
Tik tegen de patroonhouder zodat eventuele luchtbelletjes richting de naald naar boven komen.
- D. Druk de injectieknop helemaal in.
  1. Controleer of er insuline druppels uit de punt van de naald komen.
  2. Als je insuline uit de naald ziet komen is de veiligheidstest klaar.

Het kan zijn dat je de veiligheidstest meerdere keren moet doen voordat er insuline uit de naald komt.



## STAP 5

### STEL JE DOSIS IN

**Je kunt de dosis instellen in stappen van 0,5 eenheid, van minimaal 1 eenheid tot maximaal 30 eenheden. In het doseervenster kun je het aantal eenheden zien. Halve eenheden worden aangegeven met een streepje, elke klik is een halve eenheid meer.**



5.B

- A. Controleer of het dosisvenster '0' aangeeft na de veiligheidstest.
- B. Stel je dosis in door de dosisinstelling van je af te draaien.  
In dit voorbeeld is de dosis 4,5 eenheden.

## STAP 6

### INJECTEER DE INSULINE DOSIS

- A. Geef de injectie precies zoals je arts, apotheker of diabetesverpleegkundige je heeft laten zien.
- B. Steek de naald in de huid.
- C. Injecteer de dosis door de injectieknop langzaam helemaal in te drukken.
- D. Houd de injectieknop helemaal ingedrukt. Tel langzaam tot 10. Trek dan de naald uit de huid.



6.B



6.D

Als je de gehele dosis hebt geïnjecteerd, zie je '0' in het dosisvenster.

## STAP 7

### VERWIJDER DE NAALD EN GOOI HEM WEG

- A. Leg de buitenste naaldbeschermhuls op een plat oppervlak. Steek de naald in de buitenste naaldbeschermhuls en doe deze weer op de naald.
- B. Knijp in de buitenste naaldbeschermhuls om de naald vast te houden en draai de naald los van de JuniorSTAR®. Hierbij houdt u de pen vast aan de patroonhouder.
- C. Gooi de gebruikte naald weg in een naaldcontainer.



## STAP 8

### BEWAAR JE JUNIORSTAR®

- A. Plaats de dop terug op de JuniorSTAR® en bewaar de pen tot de volgende injectie.

Bewaar je JuniorSTAR® pen met de insulinepatroon bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C. Bewaar de JuniorSTAR® niet in de koelkast of in de vriezer.

JuniorSTAR® buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Verstikkingsgevaar – kleine onderdelen. Let op bij kinderen onder de drie jaar.

## ONDERHOUD

1. Bescherm de JuniorSTAR® tegen hitte, direct zonlicht of kou. Maar ook tegen stof en vuil.
2. Je kunt de buitenkant van de JuniorSTAR® schoonmaken met een vochtige doek (alleen met water).
3. Nadat je de pen 2 jaar gebruikt hebt, dien je hem op een veilige manier weg te gooien volgens de instructies van je arts, apotheker of diabetesverpleegkundige.



layar

INTERACTIVE PRINT



Download de  
gratis Layar App



Scan deze  
pagina



Bekijk direct de  
instructiefilm