


# Injecteren met NovoPen® 4


Indien u een insuline gebruikt die gemengd moet worden, volg dan eerst de meng-instructies in de bijsluiter.

1

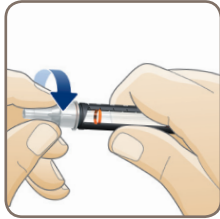

Verwijder de pendop en plaats een NovoFine® naald (handvast). Gebruik voor elke injectie een nieuwe naald.

2

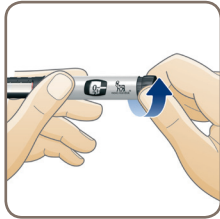


Trek de doseer-/toedieningsknop uit en stel 4 eenheden in bij een nieuwe Penfill® patroon, of 1 eenheid bij een patroon die al in gebruik is.

3




Houd NovoPen® 4 met de naald naar boven gericht en tik zachtjes tegen de patroonhouder.

4

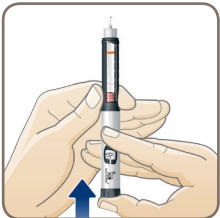


Druk de doseer-/toedieningsknop helemaal in totdat u een klik hoort. Bovenaan de naald moet een druppel insuline verschijnen. NovoPen® 4 is nu ontlucht.

5

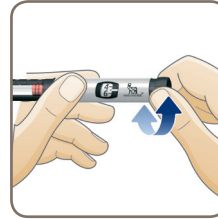


Trek de doseer-/toedieningsknop opnieuw uit en draai aan de knop totdat de gewenste dosering in het afleesvenster verschijnt.

6

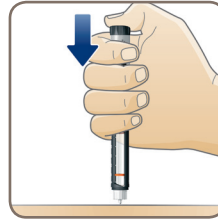


Neem NovoPen® 4 in één hand en injecteer de insuline door de drukknop rustig, zo diep mogelijk in te drukken totdat u een klik hoort of voelt. Houd de drukknop ingedrukt en tel tot 6 voordat u de NovoFine® naald uit de huid trekt.

7

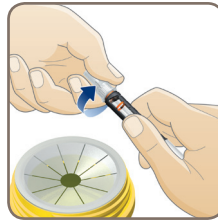


Doe de buitenste beschermdop weer voorzichtig op de naald. Schroef de naald los en gooi deze in de naaldcontainer. Plaats de pendop terug op de pen.

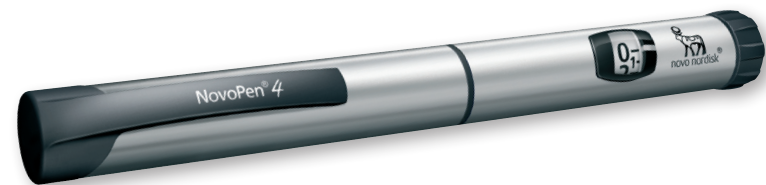

# Injecteren met Insulatard® FlexPen®


1

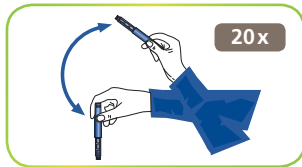

## Bij het in gebruik nemen van een nieuwe Insulatard® FlexPen®

Voor de eerste injectie met een nieuwe FlexPen® moet u de insuline mengen. Laat de insuline op kamertemperatuur komen voordat u ze gebruikt. Hierdoor gaat het mengen gemakkelijker.


Beweeg de pen vóór de eerste injectie minstens twintig keer op en neer tussen de twee posities tot de vloeistof gelijkmatig wit en troebel is.

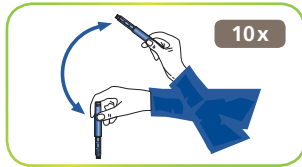

## Vóór elke volgende injectie

Beweeg de pen vóór de eerste injectie minstens tien keer op en neer tussen de twee posities tot de vloeistof gelijkmatig wit en troebel is.


2

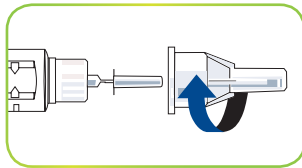

Haal de dop van de pen en schroef de NovoFine® naald recht en stevig op uw FlexPen®. Gebruik bij iedere injectie een nieuwe naald. Controleer altijd of er tenminste 12 eenheden insuline in de patroon aanwezig zijn. Is dat niet het geval, neem dan een nieuwe FlexPen®




3

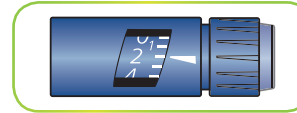


Draai de instelknop om 2 eenheden in te stellen.

4

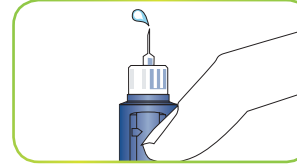


Houd uw FlexPen® met de naald omhoog gericht en tik met uw vinger een paar keer licht tegen de patroon zodat eventuele luchtbelletjes zich boven in de patroon verzamelen. Houd de naald omhoog gericht en druk tegelijkertijd de drukknop volledig in. Er moet nu een druppel insuline aan de naaldtip verschijnen.

5

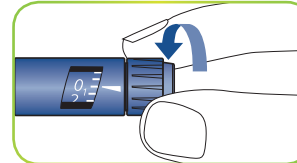


Draai de instelknop om het aantal eenheden dat u moet injecteren in te stellen.

6

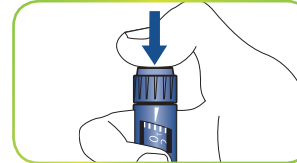

Steek de naald in de huid. Injecteer de dosis door de drukknop helemaal in te drukken. Houd de drukknop na het injecteren volledig ingedrukt tot de naald uit de huid is getrokken. De naald moet minstens zes seconden onder de huid blijven.

7

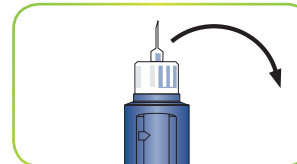

Doe de buitenste beschermdop weer voorzichtig op de naald. Schroef de naald los en gooi deze in de naaldcontainer. Plaats de pendop terug op de pen.